





機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 汎用診療・処置台  
JMDNコード：13958000  
特定保守管理医療機器

# コンバー ES ES flat

移動式 診療・処置台

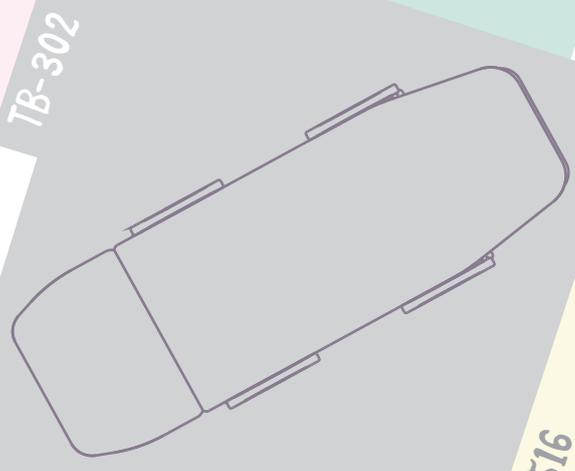

TB-516

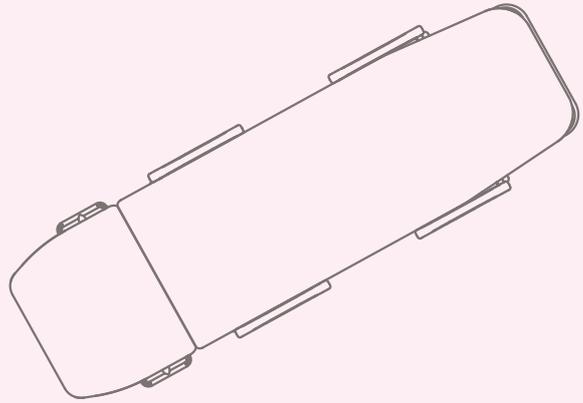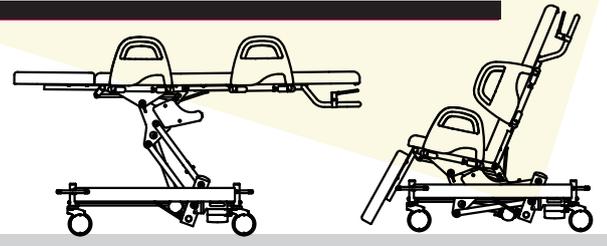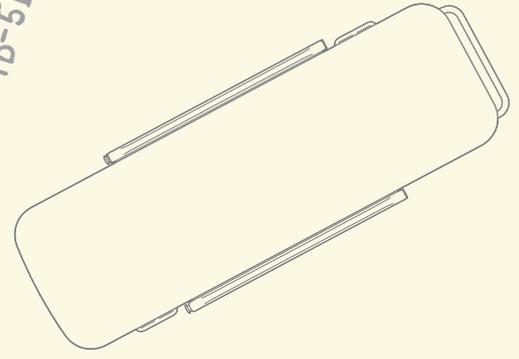


Conver is ...

# 患者さまにも、 スタッフの方にも、“やさしい”を実現

処置～搬送～リカバリーまでを1台で運用できる診療・処置台です。

Concept

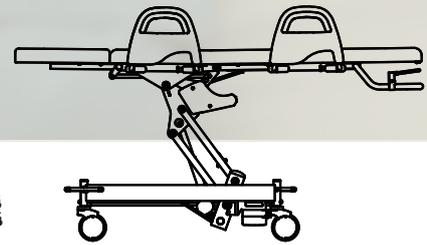

## 効率的な運用 かつ 負担のかからない運用 が可能

たとえば、内視鏡検査において…

搬送用キャスターを備えているので、検査・処置台としてご使用いただくだけではなく、患者さまを乗せたまま、内視鏡検査室とリカバリー室間の搬送・リカバリーベッドとしてご使用頂くことで、患者さまの移乗が不要となります。また、台を180°回転させることで、患者さまを起こさず頭と足の向きを入れ替えられます。※胃カメラ→大腸カメラ 同日検査時有用 患者さまのご負担、スタッフの方のご負担、その両方が軽減できるとともに、時間効率を上げることが可能になります。

## 多様化する医療現場の環境に対応

設置型ではないため、スタッフの方により“自由に”“スムーズに”レイアウトの変更が可能になります。

Choice

## 診療スタイル、運用エリアの広さに合わせて 選べる 2機種 5タイプ

製品名	品番・タイプ	リクライニング機構	フェンス形状・枚数	カラーバリエーション	特徴
コンバーES (イーエス)	TB-301 オーバルタイプ	あり (椅子型に可変)	アーチ型 グリップフェンス 4枚	基本 8色展開  標準色 ライトブルー  ※基本色以外を ご希望の場合は ご相談ください	丸みのある形状 のテーブルトップ
	TB-302 スクエアタイプ				角ばった形状 のテーブルトップ (コンバーMTと同じ形状)
	TB-303 スクエアスリムタイプ				スクエアタイプの 細型 全幅-10cm
コンバーES flat (イーエスフラット)	TB-517 4枚フェンス仕様	なし (フラットのまま)	手台にもなるフェンス 2枚	3色展開  標準色 ブルー	バッテリーユニット は別売り
	TB-516 2枚フェンス仕様				(バッテリーユニットがなくても、 電源ケーブルをコンセントに 挿すことでテーブルトップの 昇降が可能です)



# コンバー ES



製品紹介ページはこちら



背折れ機構ありの人気モデル      テーブルトップは、3種類から選択      生地色 基本8色

- 品番 TB-301 ES (丸みのある形状の テーブルトップ)
- 品番 TB-302 ES スクエアタイプ (角ばった形状の テーブルトップ)
- 品番 TB-303 ES スクエアスリムタイプ (スクエアタイプの細型 全幅 -10cm)

## ■病院・クリニックの雰囲気に合わせてテーブルトップの形を選択可能

TB-301



TB-302



TB-303



■リカバリー椅子に変化するシート      検査前・後の患者さまと目線をあわせてお話しできます

スリムなテーブルトップ幅55cmのモデル、後輪ペダルは、独自の形状をしています。

■コンセントに挿しての駆動、バッテリー駆動どちらも可能

■搬送性が高い“グリップフェンス”の4枚フェンス仕様      持ちやすい“グリップフェンス”

■トータルロック機構付きキャスターを採用      処置台としての安定性を考えたキャスター。ペダルを踏み込むことで全輪ロック⇄フリー

■消毒用エタノールに耐性のあるテーブルトップ生地を採用      手消毒用の濃度のエタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液での清拭が可能



### ■オプション



○サイドフェンスカバー (ES のみに設定)



○電動フットスイッチ (プリセット機能付き) 動かしやすく、踏みやすくリニューアル



# コンバー ES flat



製品紹介ページはこちら



高いクッション性

フェンス形状・枚数の異なる2種類から選択

生地色 3色展開

品番 TB-516 ES flat 2枚フェンス仕様

品番 TB-517 ES flat 4枚フェンス仕様

■コンセントに挿しての駆動、別売のバッテリーユニットでバッテリー駆動も可

■トータルロック機構付きキャスターを採用

■消毒用エタノールに耐性のあるテーブルトップ生地を採用

■持ちやすい“グリップフェンス”の4枚フェンス仕様

手台にもなる2枚フェンス仕様

■その他のES flat専用オプション … バッテリーユニット



○収納かご (ES flat専用)




910mm

560mm



○酸素ボンベホルダ (ES flat専用)

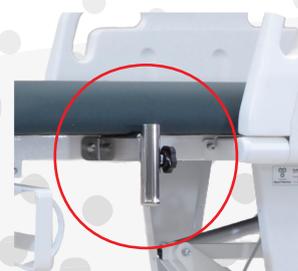

○イルリガースタンドホルダ (ES flat専用) 2コ1セット



○ヘッドサポート (ES, ES flat 共通)



○酸素ボンベホルダ (ES 専用)





○イルリガースタンドホルダ (ES 専用)  
取り付け位置を簡単に変えることが可能。



# 寸法


## ■ TB-301 ESオーバルタイプ、TB-302 ESスクエアタイプ

### ■ TB-303 ESスクエアスリムタイプ

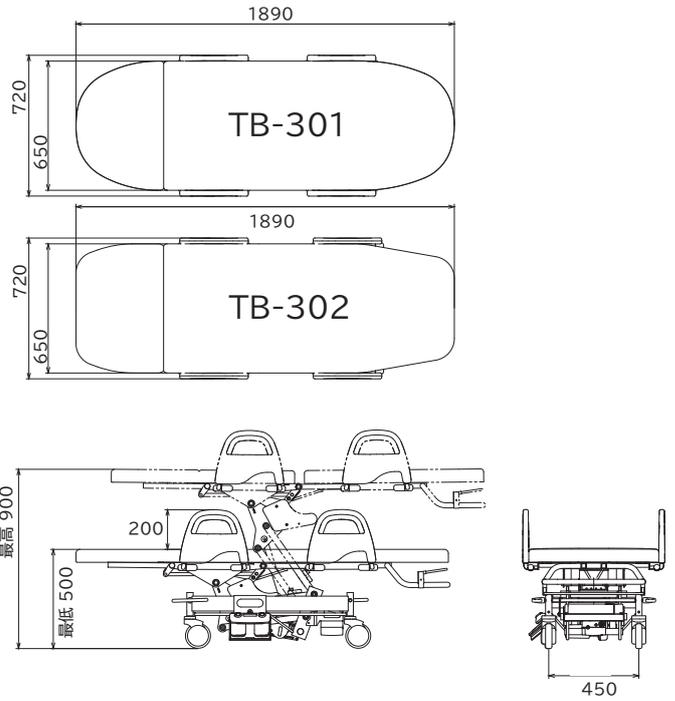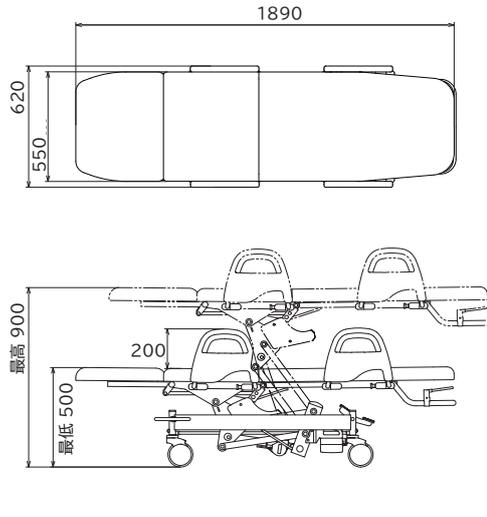


### ■ TB-516 ES flat 2枚フェンス仕様

【上昇時】

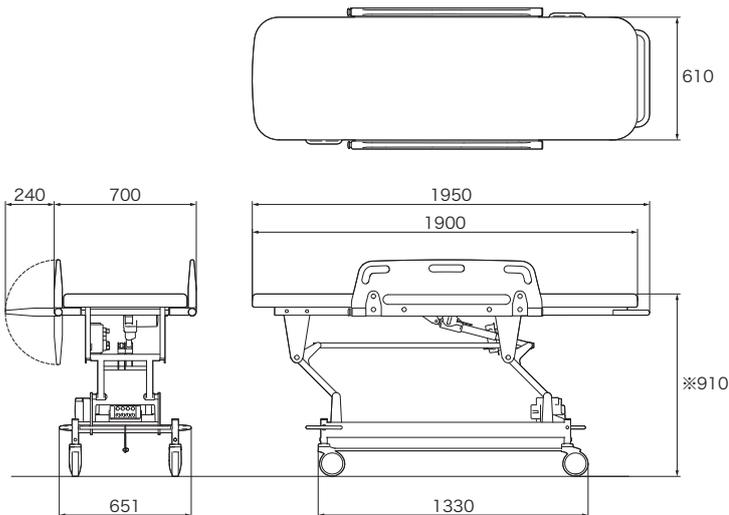


### ■ TB-517 ES flat 4枚フェンス仕様


【上昇時】

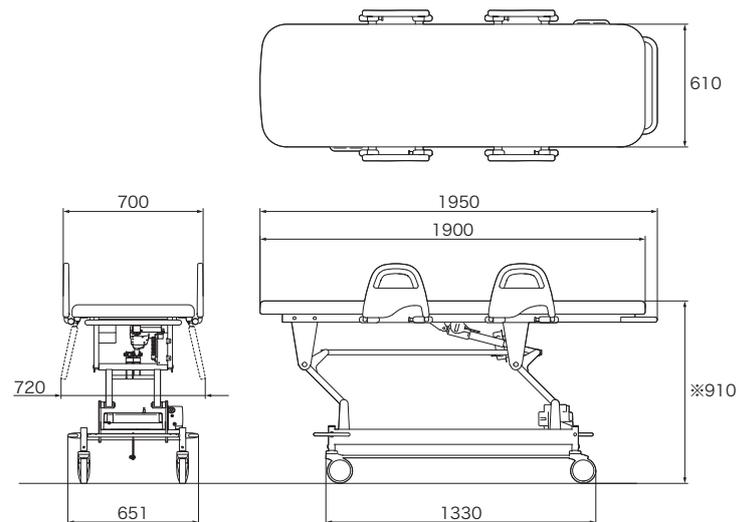

【下降時】

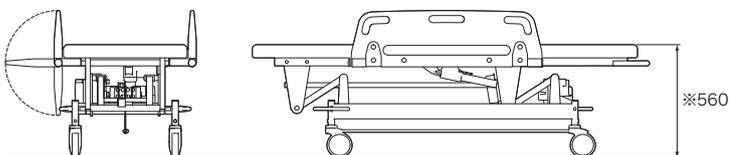



【下降時】

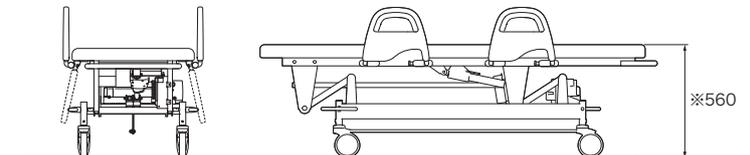

※ 高さ寸法は、マット中心部を実測値とする。

※ 高さ寸法は、マット中心部を実測値とする。

# 製品仕様

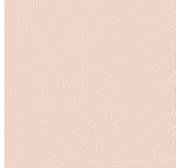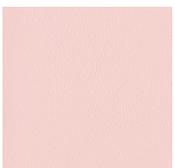品名	コンバー ES			コンバー ES flat	
品番	TB-301 (オーバルタイプ)	TB-302 (スクエアタイプ)	TB-303 (スクエアスリムタイプ)	TB-517 (4枚フェンス仕様)	TB-516 (2枚フェンス仕様)
届出番号	20B2X10007THW002			20B2X10007THW004	
類別	機械器具01 手術台及び治療台				
医療機器の分類	クラスⅠ 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器				
一般的名称	汎用診療・処置台				
全高	ストレッチャー時のテーブルトップ高 500~900 mm チェア状態の高さ 1,260~1,660 mm			テーブルトップ高 560~910 mm	
奥行	ストレッチャー状態 1,890 mm チェア状態 1,290 mm			1,950 mm	
全幅	サイドフェンスを立てた状態 720 mm サイドフェンスを下げた状態 730 mm	サイドフェンスを立てた状態 620 mm サイドフェンスを下げた状態 630 mm	サイドフェンスを立てた状態 700 mm サイドフェンスを下げた状態 720 mm	700 mm	
座幅	650 mm	550 mm	610 mm		
座奥行	450 mm				
リクライニング角度	0 ~ 66°				
座部チルト角度	0 ~ 13°				
キャスター	φ125 mm トータルロックタイプ				
重量	76 kg	72 kg	69 kg	68 kg	
最大負荷	135 kg				
材質	フレーム / 鋼管 サイドフェンス / ポリエチレン (PE) 表生地 / ビニールレザー 防汚加工				
電源	AC100V 50/60Hz				
消費電力	210VA				
定格連続運転許容時間※	最大 2分 ※定格連続運転許容時間:昇降動作を休止することなく、連続的に行う時間です				
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器				
分類	B形装着部 製品外装の  マークはB形装着部であることを示します。				
モーター形式	24VDC モーター				
バッテリー容量	24V × 5.0AH			オプション設定 (24V × 5.0AH)	
使用環境	温度5℃~40℃、湿度30~75%RH(但し結露しないこと)				
保管環境	温度-10℃~60℃、湿度10~90%RH(但し結露しないこと)				
テーブルトップ およびヘッドサポート(専用マクラ)、サイドフェンスカバーのカラーリング	 ES1 ライトブルー [標準色]	 ES2 ピンクベージュ	 ES3 ミルクティ	 ES4 チョコ	 MT ブルー [標準色]
	 ES5 サクラ	 ES6 ダークブルー	 ES7 モカ	 MT ブルー	 ES1 ライトブルー  ES7 モカ
オプション	プリセット機能付き フットスイッチ	鋼板・ABS		品番 TB-352	品番 TB-567
	イルリカートルススタンドホルダ	鋼板・鋼管 (点滴棒は付属しません、φ25 対応)		品番 TB-350	品番 TB-566 (2コ1セット)
	酸素ボンベホルダ	鋼板・鋼管 (圧縮容量 500ℓ用)		品番 TB-351	品番 TB-561
	ヘッドサポート(専用マクラ)	表皮:ビニールレザー		品番 TB-354	
	サイドフェンスカバー	表皮:ビニールレザー		品番 TB-353	
	収納カゴ	鋼板			品番 TB-562

○色・形状につきましては 実際の製品と異なる場合があります。また、予告なく仕様を変更する場合があります。

## ■お問い合わせ



■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331  
TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203

お客様ご相談窓口  0120-825-845

受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日、祝日、GW、夏季・冬季休暇を除く)

■ホームページ <https://www.takano-hw.com/>

■E-mail [fukushi@takano-net.co.jp](mailto:fukushi@takano-net.co.jp)