


ジェルセルシリーズ



(カバー装着状態)


エア+ジェルが高い体圧分散を実現

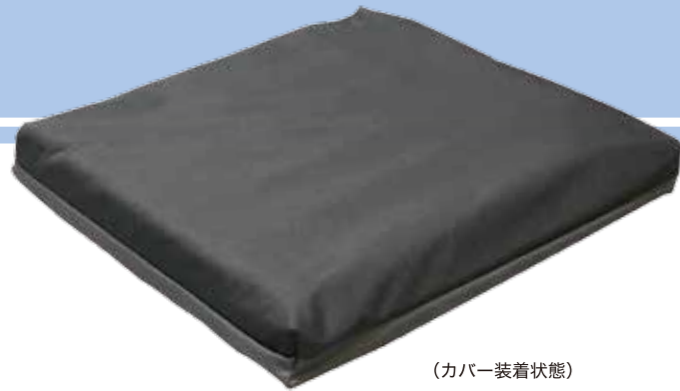

- ・ やせている方
- ・ 骨突出のある方
- ・ 長時間座る方


ジェルセル

エアとジェルの組合せで優れた体圧分散効果を発揮。エア調整バルブ1カ所。

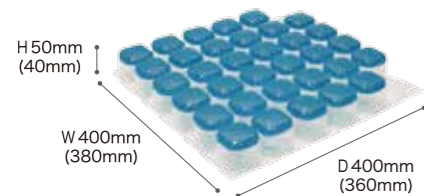

ジェルセルプラス


ジェルセルに専用ベースがついて、姿勢がさらに安定します。

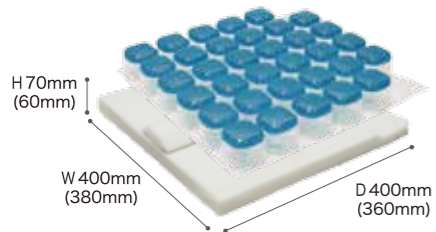

対象者 体圧分散を重視する方


ジェルセル G2

小さなセルを骨盤部分に配置し座位が安定。左右2カ所のエア調整バルブで簡単にフィッティングができます。

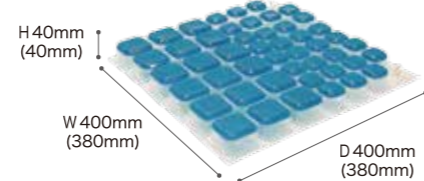

ジェルセルG2プラス

ジェルセル G2 に専用ベースがついて、姿勢がさらに安定します。

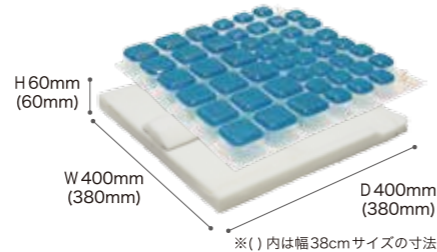

対象者 姿勢保持を重視する方

タイプ	ジェルセル		ジェルセル G2		ジェルセルプラス		ジェルセル G2 プラス	
品番	TC-GC1-40	TC-GC1-38	TC-GC2-40	TC-GC2-38	TC-GC1P-40	TC-GC1P-38	TC-GC2P-40	TC-GC2P-38
価格(税別)	43,000円				49,400円			
重量	1500g	1400g	1500g	1300g	1800g	1700g	1800g	1600g
TAISコード	00297-000079		00297-000080		00297-000081		00297-000082	
JANコード	4523725002211	4523725002242	4523725002228	4523725002273	4523725002259	4523725002266	4523725002280	4523725002297
カラー	ブラック				ブラック			
材質	本体：ポリウレタンフィルム、シリコンジェル カバー：ポリエステル				本体：ポリウレタンフィルム、シリコンジェル 専用ベース：ポリエステル/カバー：ポリエステル			



エア + ジェルのW効果で体圧分散

圧力分散性能に優れたエアとジェル。表面のジェルが柔らかくお尻を支え、エアがクッション全面に均一に体重を分散します。



- ・ 人肌のように柔らかいジェルが変形することで、ずれ力を吸収します。
- ・ 温度依存性のあるジェルなので、体温をキープし冷え過ぎず暑くもなりません。
- ・ 万が一、エア漏れの場合もジェルが底づきを防ぎます。




- ・ ジェルセルは34個(G2は左右24個)の連結したセルを空気が移動することで、圧力を均一に分散します。
- ・ 長期間座っても一ヶ所に圧力が集中しにくいので、おしりが痛くなりやすいです。

体圧分散性能

ジェルの柔らかさとセル間の空気の移動で優れた体圧分散性能を発揮します。

標準車いすに15分座った状態

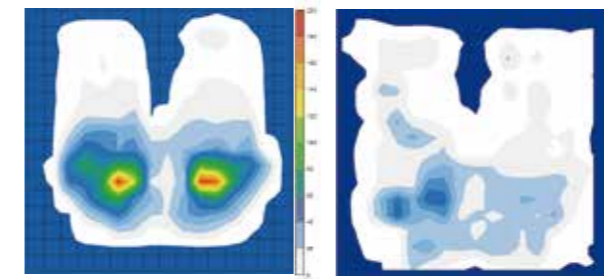

▲車いすスリングシートの体圧分散 ▲ジェルセルの体圧分散
※体圧分布測定装置(FSA)を用いて測定。/身長174cm、体重73Kg

付属品



- ・ ハンディポンプ(写真上)
- ・ リペアキット(写真下)

簡単フィッティング


所要時間はわずか10秒。難しい調整はいりません。
※定期的に空気量を確認し、調整してください。

詳しい調整方法の動画はこちら



ジェルセル ジェルセルG2

ジェルセル(1バルブ)の場合

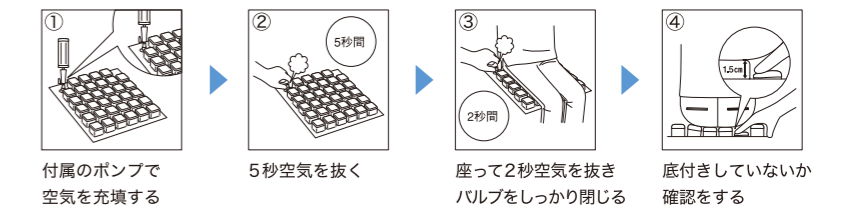

ジェルセルG2(2バルブ)の場合

