

すべての人に笑顔を…

姿勢補助手すり

楽助さんⅡ

らくすけ

どこでも必要な時にサッと設置！
ご利用者の体の状態に合わせた
最適な座位姿勢を保つことができます。



開発監修: 昭和伊南総合病院

あらゆるシーンでの座位保持でご使用いただけます



排泄姿勢保持



車いす・介護いすでの姿勢保持



ベッドサイドでの端座位保持

排泄時の転倒・転落事故防止に役立ちます

椅座位時のずっこけ座りを予防できます

安全に端座位が取れることで離床機会が増えます

ご利用者のADL・QOLが向上し、介護者の
見守り負担軽減など環境改善に繋がります

もっと安心・便利に!!

フレーム前方とマットの形状を変更し、従来品と比較
して前方へ傾きにくなり安定性が向上しました。



すべての人に
笑顔を…

姿勢補助手すり

楽助さんⅡ

らくすけ



コンパクトサイズ

狭いスペースでも設置できるので、様々な場所でご利用いただけます。
利用しないときは折りたたんで収納できるので、無駄な場所を取りません。

簡単な調整


ご利用者の体格や身体状況に合わせて、
マットの高さ・角度を簡単に調整できます。

いつでもどこでも使えます

固定式でないため、設置工事不要です。
持ち運びもコンパクトで楽々です。



狭いトイレでも使えます

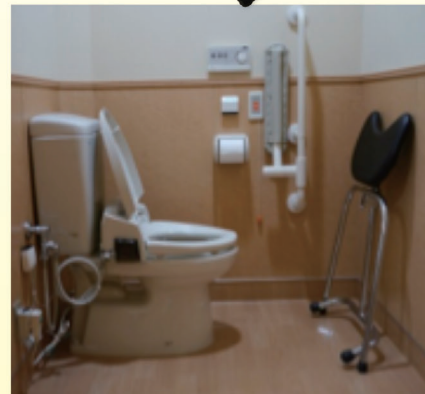

折りたたんで場所をとりません




高さや角度が調整できます

仕様

寸法	W630mm×H610～730mm×D620mm(使用時) マット面寸法 W470×D280mm
重量	5.0kg
マット面高さ	610～730mm (5段階、30mmピッチ)
マット面角度	0° 15° 30° 45°
最大使用者体重	100kg
材質	マット：PVCレザー、ウレタンフォーム フレーム：鉄(めっき処理)、ステンレス
使用環境	前方スペース50cm以上 設置場所の幅70cm以上
TAISコード	01239- 000009 (その他の支持用具)

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

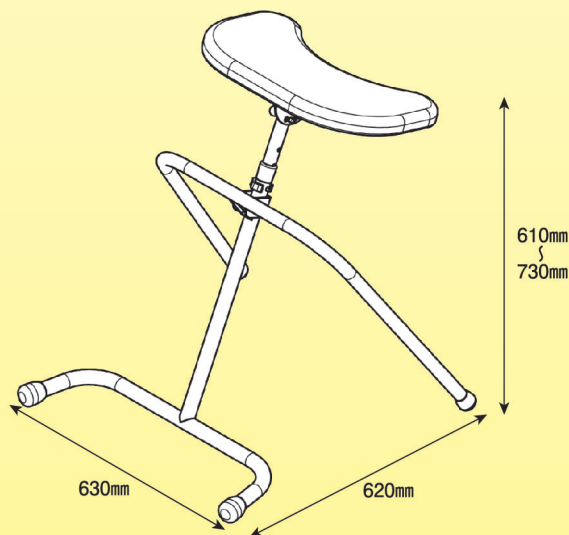

企画・製造元 **アイデアライフケア 株式会社**

販売元 **タカノ株式会社**

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203
Email fukushi@takano-net.co.jp

楽助さん商品サイトはこちら！
<https://www.takano-hw.com/heartworks/products/stretcher/rakusuke2>



専用サイト

●お問い合わせ