

タカノクッションS

よりスタンダードな車いすクッションへ

現場の声から
実った心地よさ

POINT1

タカノオリジナルのウレタン積層構造

POINT2


圧分散に効果的なシャインスポット

POINT3

シンプルで選びやすいスタンダードな4タイプ


「座りやすい」をとことん追求したタカノクッションS

ウレタン積層構造

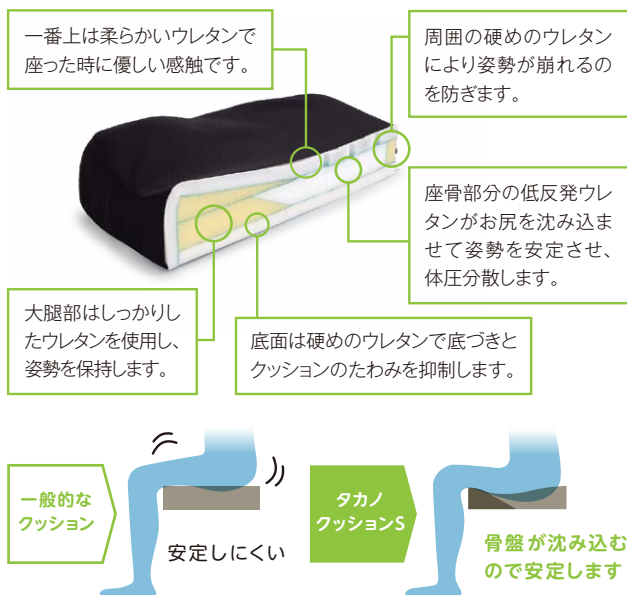

NEW シャインスポット

骨盤が後傾した座り姿勢に対応。マスカット形状を模した13個の圧分散ポイントが尾骨・仙骨部の圧分散を効果的にを行います。

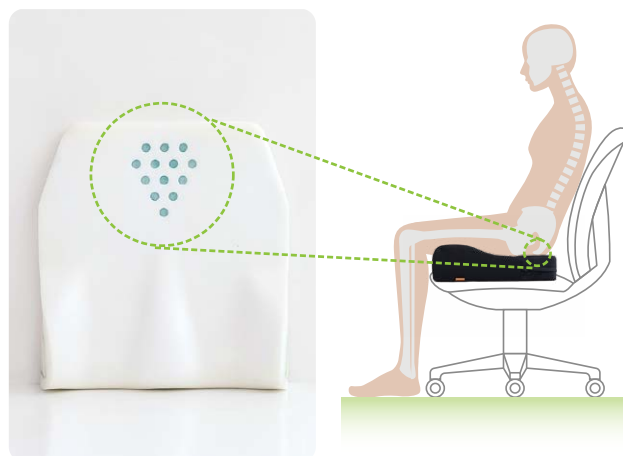

シンプルで選びやすいスタンダードな4タイプ


Sタイプ1 高性能圧分散・姿勢保持

体圧分散性に優れ、やせ型の方から大柄な方まで幅広く対応できるタイプ。大腿部をサポートし姿勢保持効果も高い。




Sタイプ3 前ズレ予防

アンカー形状により前ズレを予防するタイプ。自然な大腿部の盛り上がりにより、もも裏の圧迫を軽減し快適に前ズレを抑制。

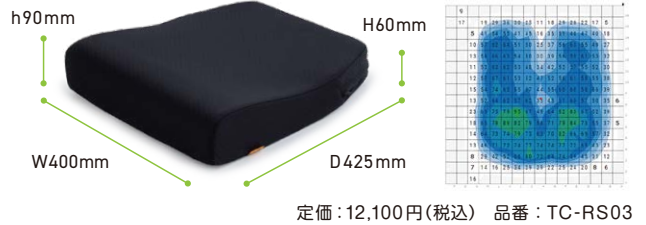


Sタイプ4 フラット形状

厚み6cmのフラットタイプ。使用シーンを選ばない選定の基準モデル。圧分散、活動性の両立を求める方におすすめ。

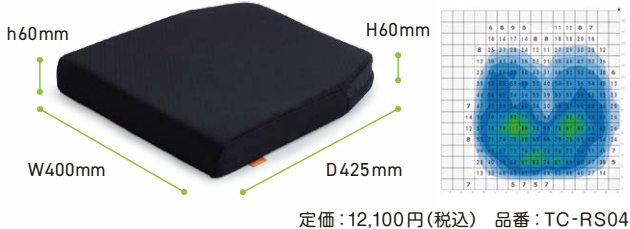


Sタイプ6 薄型汎用性・姿勢保持

クッションの厚み・高さが気になる時に選びやすいタイプ。太ももをサポートする姿勢保持機能も備えており標準型車いすにもおすすめ。

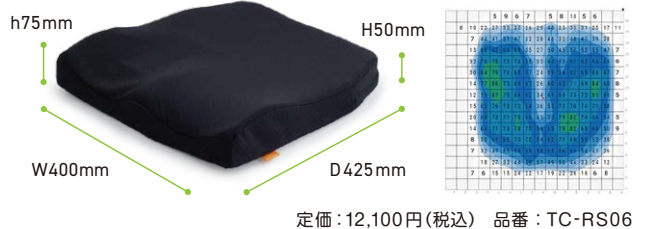


体圧分散性能

標準車いすに15分座った状態

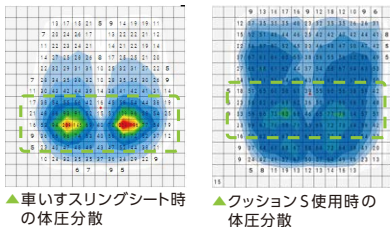

硬さの異なるウレタンの積層構造は、体圧分散性が良く、長時間でも快適にお座りいただけます。

車いすのスリングシートのたわみに対応

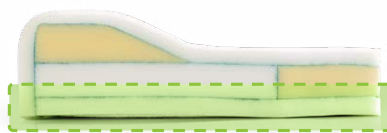


タイプ1、3、6は底面の硬いウレタンが厚くなっているため、車いすのスリングシートのたわみの影響を受けにくく姿勢保持が可能です。

素材と機能にこだわり、清潔にお使いいただける専用カバー

アウターカバーはしわになりにくいオリジナル生地(アクアフィット)を採用、サラッと快適な使い心地。

裏面には全面滑り止め加工の生地を使用しているため、安心してご利用いただけます。

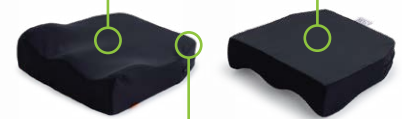

クッションの背面は、車いすの背にフィットする形状になっているため、車いすにフィットしやすく機能を損ないません。



タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル

0120-825-845

受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話からもご利用いただけます。

<https://www.takano-hw.com>

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp Rev.1.2026.01



タカノ
ハートワークス
WEBサイト

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ