

にこにこクッション

介護保険
レンタル
対応商品




いつでも清潔で快適に。
そのまま丸洗いでできる多面体クッション。



- ・蒸れが気になる方
- ・除圧動作が自分のできる方
- ・硬めがお好みの方

タイプ S1


大腿部とお尻の位置を保持する
コンター形状で姿勢が安定します。

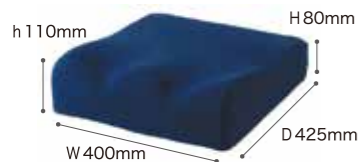

対象者 姿勢保持ができない方

タイプ S2


タイプ S1 の薄いタイプで姿勢を
保持します。

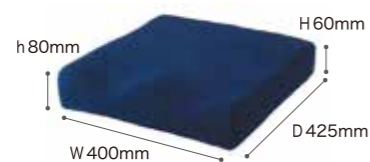

対象者 姿勢保持ができない方
(車いすの肘高調整が難しい方)

タイプ S3


座る面が平らなタイプ。ベッドなど
への移乗がスムーズです。

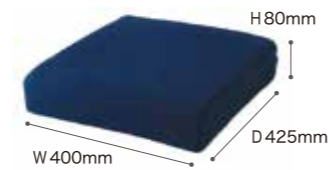

対象者 姿勢保持ができる方、
頻繁に移乗する方

タイプ S4


タイプ S3 よりも 2cm 薄い平らなタイプ。
移乗がスムーズです。

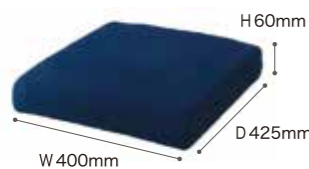

対象者 姿勢保持ができる方、
頻繁に移乗する方
(車いすの肘高調整が難しい方)

背用

背もたれに置くタイプ。骨盤と背骨
を支えて良い姿勢を保ちます。

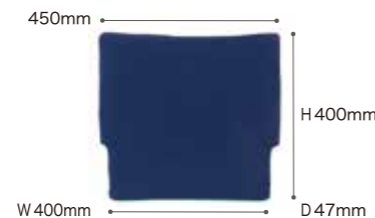


対象者 クッションを使用しているが
姿勢が崩れてしまう方


さらっと爽やか蒸れにくい

通気性が良く蒸れを防ぐポリエステル素材の多層多面体構造。
丸洗いして乾燥もできる、清潔にとことんこだわったクッションです。

大腿部に沿う形状で、
座った時に位置が安定します。
※タイプ S1、タイプ S2 のみ

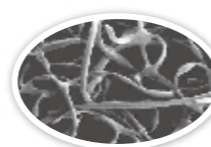

ポリエステル繊維をアメーバ状に結び付けた、
通気性と弾力性に富んだ中材で、蒸れを解消し
さらっとした使い心地です。

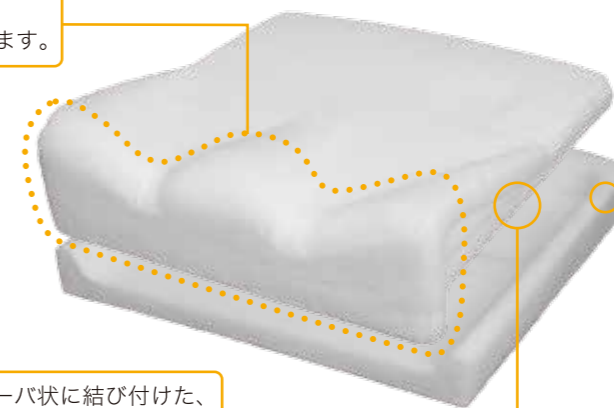


車いす上でたわみにくいう、
硬めのベースにしています。

体圧分散性能

多面体構造により体圧分散性にも配慮しています。


標準車いすに15分座った状態

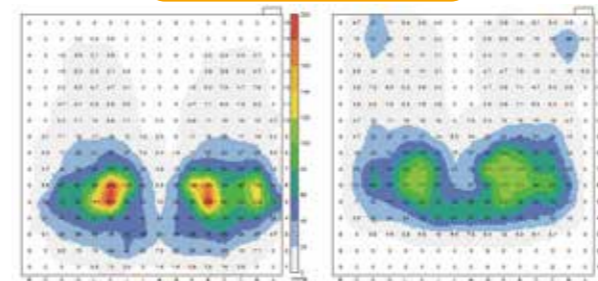

▲車いすスリングシートの体圧分散 ▲にこにこクッションタイプS1の体圧分散
※体圧分布測定装置 (FSA) を用いて測定。/身長 174cm、体重 73Kg

丸洗いでできていつでも清潔

カバーをかけたまま洗濯機で洗濯できます。乾燥機
にも対応。さらにカバーは吸湿速乾素材に抗菌防臭
加工をしています。普段使いの汗や汚れに効果を
発揮します。

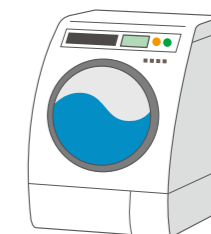

30℃ 中性 乾燥機 OK
高圧滅菌・オゾン消毒

タイプ	タイプ S1	タイプ S2	タイプ S3	タイプ S4	背用
品番	TC-S1	TC-S2	TC-S3	TC-S4	TC-B1
価格(税別)	15,000円	14,000円	15,000円	14,000円	10,000円
重量	655g	630g	640g	625g	340g
TAISコード	00297-000063	00297-000070	00297-000071	00297-000072	00297-000078
JANコード	4523725001511	4523725001528	4523725001535	4523725001542	4523725001566
カラー	ブルー				
材質	本体：ポリエステル / カバー：ポリエステル、アクリル (滑り止め加工) 防炎性に優れ、有毒ガスが発生しません。(防災協会寝具類認定基準)				本体：ポリエステル カバー：ポリエステル