



■ 子ども用シャワーチェア **SOCOTTO**


品 名	本 体 部	脚 部
品 番	TS-851	TS-852
全 幅	①465	⑭460
全 奥 行	②685～940 (使用時) ③815 (折りたたみ時)	⑮710 (使用時) ⑯90 (折りたたみ時)
全 高	④430～655 (使用時) ⑤255 (折りたたみ時)	⑰550 (使用時) ⑱835 (折りたたみ時)
座 幅	⑥375	—
座 の 奥 行	⑦190	—
座 の 高 さ	⑧100 ※脚部装着時は620	—
背もたれの長さ	⑨340	—
レッグサポートの長さ	⑩135～235 【20mm×6段階】	—
ヘッドサポートの長さ	⑪175～335 【40mm×5段階】	—
座 の 角 度	⑫20°	—
背もたれの角度	⑬120°、140° 【2段階】	—
重 量	4.2kg	1.8kg
対象者目安	～145cm / ～40kg	

●材質/本体部、脚部：アルミニウム 脚ゴム：EPDM (単位 mm)
調節ピン：ポリプロピレン、スチール
クッション：ポリウレタン

品 名	サポートベルト (左右・1セット)
品 番	TS-853
全 幅	80
全 長	370
厚 み	5

●材質/
クロロプレンゴム
ナイロン、POM
(単位 mm)

■ 寸法図

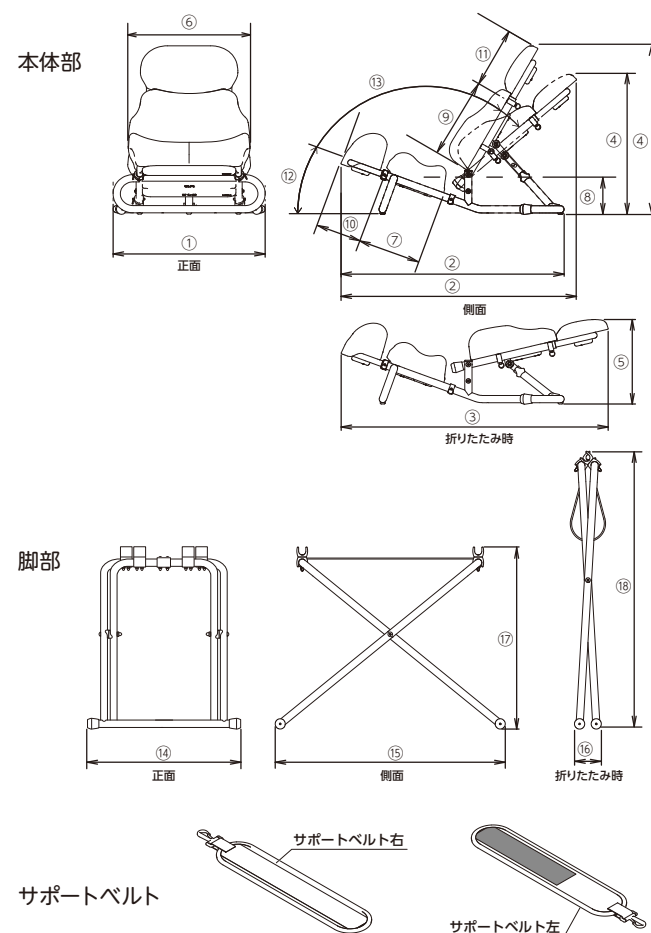

タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル

0120-825-845

受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話からもご利用いただけます。

<https://www.takano-hw.com>

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp Rev.3.2024.9



タカノ
ハートワークス
WEB サイト

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。


お問い合わせ



子ども用シャワーチェア
製品カタログ

こ
こ
ち
よ
い
時
間
に
す
る



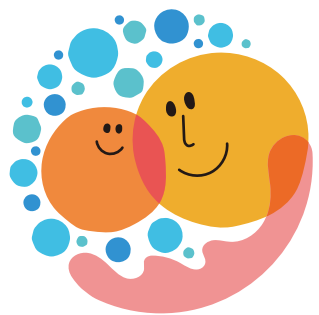

SOCOTTO
ソコット



ラベンダー アイボリー
ソフトクッションは
2色のおしゃれな
ニュアンスカラーから選択。



+



+



+

本体部+脚部+
サポートベルト2セットなど、
お使いのシーンや
お子さまのご様子に合わせ
お選びください。



SOCOTTOは
2024年キッズデザイン賞を
受賞しました。

ソフトで、座りココチ・つかいココチよく、
コンパクトな子ども用シャワーチェアです。
両手を使って、お子さまと
目線を合わせながら、
安全で負担の少ない入浴ができます。



Point

1 水はけがよく
カビが発生しにくい

シート部は、防水のソフトなクッションタイプ。ご使用後は水を払って拭き取ればすぐ乾き、カビの発生を防ぎます。



防水
ウレタン
シート

Point

2 コンパクトで
ユニットバスでも使用可能

日本のユニットバスの洗い場でも使いやすいコンパクトサイズ。スペースを広く確保できます。
※ドアの開閉方法によっては使用できない場合があります。




ユニットバスでの使用例
(1坪/約3.31㎡)

全幅
460mm
全奥行
720mm

Point

3 折りたたみが
簡単

本体部と脚部を合わせても、幅30cmとコンパクトなので、洗濯機の横など、ちょっとした隙間に収納できます。

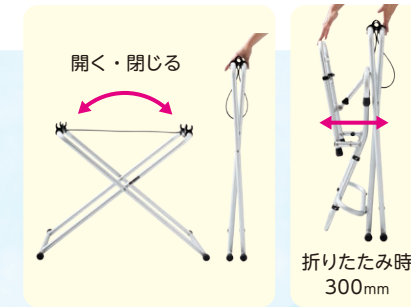

※クッション取り外しの場合

Point

4 座位を安定させる
角度調整と各シート形状

背シートと座シートは適度な姿勢の安定を促すサポート形状。背角度は2段階で簡単に調整できます。シートは柔らかくソフトな座り心地で、安心してお座りいただけます。




背角度調整は
つまみを引っ張り、倒すだけ

120° 140°

前ずれを防ぐ
座の角度

2段階
リクライ
ニング

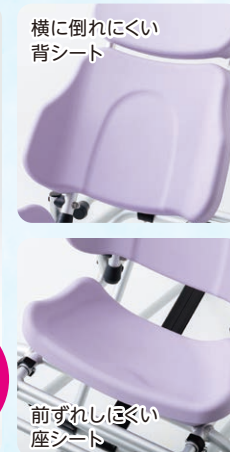

横に倒れにくい
背シート

前ずれしにくい
座シート

Point

5 フレームを調整することで
成長対応が可能

目安として12歳(身長145cm)までのお子さまが対象になります。



身長
120~145cm
対応

背の高さ
500~650mmまで
調整可能

大腿部の長さ
250~350mmまで
調整可能

Point

6 ハイ・ロー設定で
介助者の腰痛を防ぐ

脚部を使うと、座高が上がり、無理な体勢による介助負担をなくします。背中やお尻、髪も洗いやすい構造です。



オプション脚
装着時
座面高 60cm

ハイ

ロー

Point

7 ベルト位置調整に
転落やズレ防止

緊張による転落・ズレを防ぐために、サポートベルトをご用意。お体に合わせて取付位置が調整できます。



ベルトを取り付けるためのリングは、
胸部や大腿部など4カ所あります。

①左右のベルトを本体の
リングにとりつけます。
②中央で重なる部分がマジック
テープになっていますので、
調整しながらとめてください。

Point

8 外出先でも
活躍

本体部4.2kg・脚部1.8kgと軽量で、コンパクトに畳んだまま運べます。車に乗せて外出先で使う方にも。

